



GloboDent

Lux BRITE

## **LuxBrite Personal Teeth Whitening Accelerator**

Bienvenido al Mundo LuxBrite.

¡Nos gustaría agradecerle la confianza depositada en nosotros por realizar la compra del LuxBrite Personal Teeth Whitening Kit, Gracias! El equipo de GloboDent se compromete y garantiza unas sonrisas mas blancas y brillantes con nuestros productos. Desarrollamos y fabricamos los productos GloboDent bajo unas altas y estrictas normas de fabricación y calidad, que junto con el departamento del R + D cumplimos unos requisitos de alta calidad que garantizaran a nuestros consumidores un cuidado de su blanqueamiento dental seguro, cómodo y duradero.

¡En busca de la sonrisa perfecta, GloboDent le ofrece el Sistema de Blanqueamiento de Dientes Personal LuxBrite como la opción “perfecta e inteligente” para sus dientes! Esta solución ideal de blanqueamiento funciona con cualquier dispositivo móvil u ordenador. Puede utilizarlo desde la comodidad de su hogar, oficina o viaje de vacaciones.

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de su primer uso.

**Verifique su Sistema de Blanqueamiento de Dientes Personal LuxBrite, para asegurarse de los siguientes elementos estén incluidos:**

- 1 Férula con luz de Blanqueamiento Dental Personal LuxBrite
- 3 Jeringas de gel blanqueante LuxBrite (jeringas de gel transparente)
- 1 Jeringa de gel Remineralizante LuxBrite (jeringa de gel azul)
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Guía de colores

### **Como Usar LuxBrite**



1. Use hilo dental y cepille sus dientes suavemente.
2. Determine el color del diente original utilizando la Guía de Colores ubicada dentro del Kit de Blanqueamiento de Dientes Personal LuxBrite. (Figura A).
3. Aplique una capa delgada de gel blanqueador (jeringa de gel transparente) a lo largo del margen interior de la férula con luz LED. Este método debe aplicarse en la parte interior de la férula con luz LED. Este método debe aplicarse en la parte superior e inferior para garantizar que todos los dientes frontales entren en contacto con el gel blanqueador. (Figura B).



GloboDent

Lux BRITE

4. Muerda al cerrar la boca alrededor de la férula. (Figura C).
5. Conecte su LuxBrite a un dispositivo móvil inteligente o puerto USB y luego configure el temporizador en su dispositivo durante 15 minutos (Figura D).
6. Repita una sesión más de 15 minutos. Estas dos sesiones pueden completarse consecutivamente o repartirse durante el día. Para obtener mejores resultados, complete (2) sesiones de 15 minutos diarias durante 3 días consecutivos (Figura E).
7. Para remineralizar sus dientes, aplique una capa fina del gel Remineralizante (jeringa de gel azul) a lo largo del margen interior de la férula, sujétela y haga el tratamiento de remineralización durante 5 minutos. No se requiere activación de luz para este proceso.
8. Compruebe el color final después de completar el procedimiento de blanqueamiento y disfrute de su nueva blanca y brillante sonrisa. (Figura F).

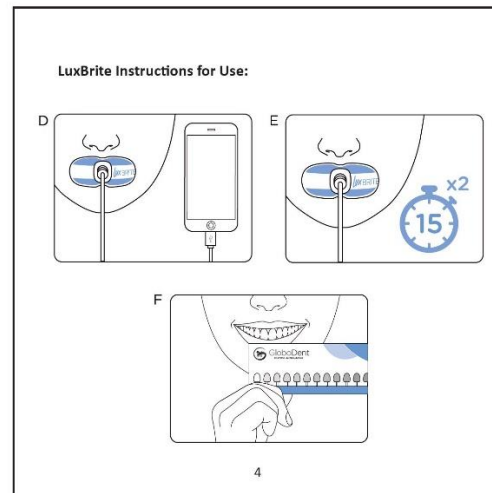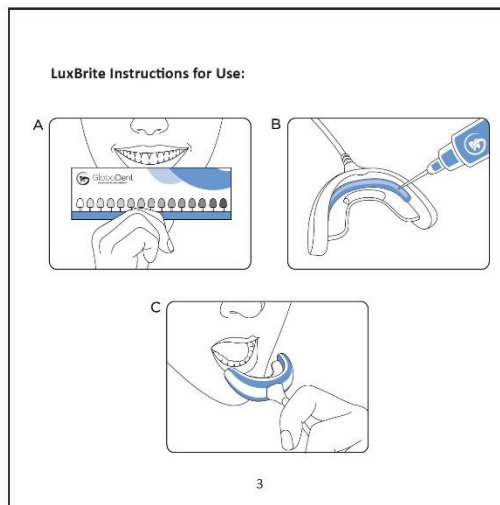

Cada kit de Blanqueamiento Dental Personal LuxBrite está equipado con suficiente gel blanqueador para 15 sesiones (5 sesiones por jeringa), lo que equivale a 5 días o más dependiendo de cómo organice sus sesiones de aplicación. Tenga en cuenta que nuestro gel Remineralizante está diseñado para fortalecer sus dientes después del blanqueamiento y para ayudar con cualquier problema de sensibilidad.

**Descargo de responsabilidad del producto** Tenga en cuenta que los resultados variaran entre los consumidores. Los resultados dependen del color inicial (como se refleja en la guía de color) y de la naturaleza de los dientes. Le recomendamos encarecidamente que use hilo dental y que se cepille los dientes suavemente antes de usar el kit de blanqueamiento dental personal LuxBrite. Además, evite el consumo de alimentos y bebidas que puedan manchar los dientes durante las siguientes 24 a 48 horas. Café, Tabaco, Salsas, comidas y bebidas que puedan tener colorantes. Limite el uso de tabaco.



GloboDent

Lux BRITE

### **Garantía LuxBrite**

GloboDent garantiza sus productos durante dos años después de la compra. Los defectos debidos a materiales defectuosos y mano de obra serán reparados o reemplazados por GloboDent, siempre que se proporcione una prueba convincente de la compra en el periodo de calificación. Para que el dispositivo se use correctamente, el usuario debe cumplir estrictamente todas las instrucciones incluidas en el manual del usuario y debe abstenerse de cualquier acción que pueda dañar el dispositivo, incluido el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de carga, reparación incorrecta, mantenimiento incorrecto, uso anormal o excesivo. La garantía tampoco cubre el desgaste normal del dispositivo.

### **Contraindicaciones**

El gel blanqueador LuxBrite esta contraindicado para consumidores con alergias conocidas o sensibilidad química a peróxidos y/o glicoles.

No esta recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas que hayan sufrido un cáncer en los últimos dos años, salvo que el Doctor – Oncólogo se lo autorice.

### **Advertencias**

Puede ocurrir que tenga irritación leve en las encías por el exceso de gel puesto en las encías. Si se produce irritación severa de las encías o la boca, interrumpa y consulte a su dentista.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### **Ingredientes**

Peroxido de Hidrogeno

#### **GloboDent Headquarters**

27131 Cinco Ranch Blvd. Ste 600-203

Katy, TX 77494

Ph: +1 (281) 712.8764

Email: [info@globodent.com](mailto:info@globodent.com)

[www.globodent.com](http://www.globodent.com)